

# Teknisk datablad

## Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

### 1. Identifikation af produktet og af virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator.

<b>Handelsnavn:</b>	Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate
<b>Tilsigtet anvendelse:</b>	Produkterne er beregnet til anvendelse som førstehjælp ved skylning af øjne efter uheld, hvor syrer og alkalier har været involveret.
<b>Udløbsdato:</b>	Trykt på flaskens etiket.

#### 1.2. Nærmere oplysninger om leverandøren af databladet

<b>Producent:</b>	
<b>Virksomhed:</b>	Plum Safety ApS
<b>Adresse:</b>	Mandelallen 1
<b>Postnummer:</b>	5610
<b>By:</b>	Assens
<b>Land:</b>	DANMARK
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:info@plum.eu">info@plum.eu</a>
<b>Telefon:</b>	+45 6916 9600
<b>Fax:</b>	+45 6916 9630

#### 1.3 Juridisk information

<b>Generel information:</b>	Da produkterne ifølge Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr er medicinsk udstyr klasse Is, er de certificerede af godkendelsesorganet, Presafe. Der er ikke krav om sikkerhedsdatablad for medicinsk udstyr.
-----------------------------	---

Produkterne skal ikke klassificeres som farlige ifølge reglerne for klassificering og mærkning af stoffer og blandinger.

Plum Safety ApS er certificeret i henhold til ISO 13485:2016 (medicinsk udstyr – kvalitetsledelsessystemer – krav til lovmæssige formål).

#### 1.4 Instruktioner til anvendelsen: Mono øjenkop (200 og 500 ml) / øjenkop til skylning (1.000 ml)



#### DUO øjenkop (500 ml)



- Vask altid efter med Plum Eyewash 0,9% Sodium Chloride efter anvendelse af Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate!
- Må ikke genbruges.
- Må ikke anvendes, hvis beskadiget
- Anbefalet temperatur under brug



# Teknisk datablad

## Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

### 2. Generel information om produktet

**Krav til materialer:**

Materialerne i disse produkter er vurderet til at være biokompatible i overensstemmelse med kravene i *ISO 10993-1:2009 Biologisk vurdering af medicinsk udstyr – Del 1: Evaluering og prøvning inden for rammerne af en risikostyringsproces*.

**Dimensioner for flaske, etiket og øjenkop.**

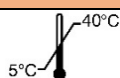
	200 ml flaske	500 ml flaske	1000 ml flaske
Flaskemateriale:	Polyethylen uden tilsætningsstoffer	Polyethylen uden tilsætningsstoffer	Polyethylen uden tilsætningsstoffer
Flasken indeholder [ml]	201-207	505-512	1005-1020
Bund Ø [mm]	58,5	78	90
Højde [mm]	129,6	183	229

### 3. Bivirkninger og defekter

**Bivirkninger og defekter:**

Produkterne er udviklet til anvendelse som førstehjælp ved skylning af øjne. Eventuelle bivirkninger eller defekter bedes indberettet til Plum Safety ApS, [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu) eller telefon +45 6916 9600, så de nødvendige afhjælpende foranstaltninger kan iværksættes. Alvorlige bivirkninger skal altid indberettes til den relevante myndighed.

### 4. Opbevaring

**Opbevaring:****Holdbarhed:**

42 måneder fra produktionsdato.

**Installation:**

Se piktogrammet på etiketten:

**Førstehjæpsstationer og -bokse:**

Gå ind på <https://plum.eu/products/firstaid/eye-wash>

### 5. Øvrig information

**Versionshistorik og ændringsangivelser**

Version	Ændringsdato	Ansvarlig	Ændringer
1.3	25-05-2021	CL	1.2, 1.3, 3, 5
1.2	29-09-2020	CL	5
1.1	03-06-2020	CL / VWB	3, 5
1.0	14-04-2020	CL / VWB	

**Øvrig information:**

Yderligere information kan rekvireres ved at kontakte [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu) eller telefon +45 6916 9600.

**Teknisk datablad udarbejdet af:****Virksomhed:**

Plum Safety ApS

**Adresse:**

Mandelalleen 1

**Postnummer:**

5610

**By:**

Assens

**Land:**

DANMARK

**E-mail:**

[info@plum.eu](mailto:info@plum.eu)

**Telefon:**

+45 6916 9600

**Fax:**

+45 6916 9630

**Dokumentprog:**

Dansk